



AMIR&D

КАТАЛОГ

Хирургические шовные материалы

AMIGLID



AMIGLID Polyglycolic Acid Suture



Рассасывающийся синтетический плетёный шовный материал (AMIGLID)

Материал: Синтетический полимер на основе полигликолевой кислоты (Polyglycolic acid).

Структура: Плетёная нить с покрытием, обеспечивает хорошую управляемость и надёжную фиксацию узлов.

Покрытие: Сополимер лактида и гликолида со стеаратом кальция, снижает трение и травматизацию тканей.

Тканевая реакция: Минимальная, материал апирогенен и не обладает антигенной активностью.

Рассасывание: Происходит путём гидролиза. Полное рассасывание через 56–70 дней.

Сохранение прочности:

2 недели – 75%

3 недели – 50%

4 недели – 25%.

Цвет: Фиолетовый (краситель D&C №2, код 60725) или неокрашенный.

Диаметр нити: USP (метрический): 8-0 (0,4), 7-0 (0,5), 6-0 (0,7), 5-0 (1), 4-0 (1,5), 3-0 (2), 2-0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2 (5).

Длина нити: От 10 см до 20 м.

Формат поставки: С атравматическими иглами различных типов и форм или без игл (лигатуры)

Иглы: Широкий выбор форм и типов острия (прямые и изогнутые ¼, ½, 3/8, 5/8, 7/16 окружности; J-иглы, льежобразные, с двойной кривизной и др.; колющие, режущие, обратно-режущие, тупоконечные, троакарные, шпательевидные, ланцетовидные и другие). Иглы изготовлены из медицинской коррозионностойкой нержавеющей стали, соответствующей международным стандартам AISI, SUS, ASTM, DIN.

Стерилизация: Газообразный оксид этилена (EO).

Назначение: Аппроксимация и лигирование мягких тканей.

Область применения: Хирургия, лечебно-профилактические учреждения

Формат использования: Одноразовое применение

Упаковка: Индивидуальная стерильная упаковка (внутренняя — картон/полимерный каркас; внешняя — фольга или бумажно-полимерный пакет), от 1 до 50 изделий в коробке.

Соответствие стандартам: Европейская фармакопея (Ph. Eur.), Фармакопея США (USP), СТ ТОО 262.

Условия хранения: Температура от 0 °С до 40 °С, хранить в сухом месте, защищённом от прямых солнечных лучей.

Срок годности: 5 лет.





■ - Фиолетовая нить

□ - Неокрашенная нить

AMIGLID Polyglycolic Acid Suture

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ




Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					
		1 (M4)	0 (M3,5)	2/0 (M3)	3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	5/0 (M1)
 15мм	70						MDN515S ■
 17мм	70			MDN217S ■	MDN317S ■	MDN417S ■	MDN517S ■
	75			MDN217 ■	MDN317 ■	MDN417 ■	MDN517 ■
 19мм	70				MDN319S ■	MDN419S ■	MDN519S ■
 20мм	75				MDN320 ■	MDN420 ■	
 20мм	75				MDN320P ■		
 22мм	75			MDN222 ■	MDN322 ■	MDN422 ■	
 24мм	70					MDN424S ■	
 24мм	70				MDN/324S ■		
 26мм	75	MDN0126 ■	MDN026 ■	MDN226 ■	MDN326 ■	MDN426 ■	
 30мм	75	MDN0130 ■	MDN030 ■	MDN230 ■	MDN330 ■	MDN430 ■	
 30мм	75				MDN330P ■		
 36мм	70		MDN036S ■	MDN236S ■			
	75	MDN0136 ■	MDN036 ■	MDN236 ■		MDN436 ■	
	90	MDN0136L ■		MDN236L ■			
 36мм	70		MDN036SP ■				
 36мм	70	MDN/0136S ■	MDN/036S ■	MDN/236S ■			

■ - Фиолетовая нить

□ - Неокрашенная нить

AMIGLID Polyglycolic Acid Suture





КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2/0 (M3)	3/0 (M2)
 37мм	70		MDN0137S ■	MDN037S ■	MDN237S ■	MDN337S ■
 40мм	75		MDN0140 ■	MDN040 ■	MDN240 ■	
	90	MDN0240L ■	MDN0140L ■	MDN040L ■		
 48мм	75				MDN0248 ■	
	90		MDN0148L ■			

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити
		6/0 (M0,7)
 17мм	45	MDN617S ■

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ


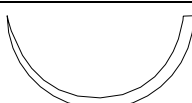
Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	
		3/0 (M2)	4/0 (M1,5)
 15мм	45		MDM415F ■
 16мм	75		MDM416 ■
 17мм	45		MDM417F ■
 26мм	75	MDM326 ■	

■ - Фиолетовая нить



□ - Неокрашенная нить

AMIGLID Polyglycolic Acid Suture




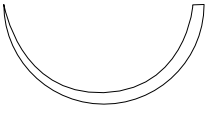

КОЛЮЩИ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		
		1 (M4)	0 (M3,5)	2/0 (M3)
 36мм	70	MDT0136S ■		
 37мм	70		MDT037S ■	MDT237S ■

КОЛЮЩИ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		
		3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	5/0 (M1)
 15мм	70		MDS415S ■	MDS515S ■
 17мм	70	MDS/317S ■	MDS/417S ■	MDS/517S ■

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ














Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	3/0 (M2)
 17мм	75			MDF017 ■	
 24мм	70	MDF0224S ■			
 26мм	75				MDF326 ■
 40мм	75		MDF0140 ■		
	90		MDF0140L ■		
 48мм	75	MDF0248 ■			
	90	MDF0248L ■			

■ - Фиолетовая нить

□ - Неокрашенная нить

AMIGLID Polyglycolic Acid Suture

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				
		2/0 (M3)	3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	5/0 (M1)	6/0 (M0,7)
 12мм	45				MDE/512F	MDE/612F
 15мм	45		MDE/315F	MDE/415F	MDE/515F	
 15мм	45			MDE/415FP	MDE/515FP	
 16мм	45			MDE/416F	MDE/516F	
 17мм	70		MDE317S	MDE417S	MDE517S	
 17мм	70		MDE/317S	MDE/417S	MDE/517S	
 19мм	70			MDE419F		
 19мм	45		MDE/319F	MDE/419F	MDE/519F	
	70		MDE/319S	MDE/419S	MDE/519S	
 24мм	75	MDE224	MDE324			
 26мм	75	MDE226				
 30мм	75	MDE230				
 37мм	70	MDE237S	MDE337S			
 37мм	70	MDE/237S	MDE/337S			

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ,СЛОЖНЫЙ ИЗГИБ ОКРУЖНОСТИ




Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити
		5/0 (M1)
 15мм	45	MDCC/515F

■ - Фиолетовая нить

□ - Неокрашенная нить

AMIGLID Polyglycolic Acid Suture

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	
		3/0 (M2)	4/0 (M1,5)
 16мм	60		MDEE416C
	75		MDEE416
 16мм	45		MDEE/416F
 19мм	45		MDEE/419F
	75	MDEE/319	

ШПАТЕЛЕВИДНАЯ, СЛОЖНЫЙ ИЗГИБ ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити
		4/0 (M1,5)
 15мм	45	MDSS/415F

■ - Фиолетовая нить

□ - Неокрашенная нить